

Sistema de Monitoreo de Glucosa en Sangre

Más precisa, Más confiable

GluNEO Lite

Sangre entera capilar y venosa
No hay interferencia de oxígeno


GDH
FAD

0.5µl

5 sec

Auto
Coding

PC
Connection

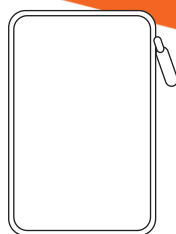

OHC
OSANG HEALTHCARE

Viralab S.A.
Contribuyendo con la calidad de su Laboratorio
Av. Universitaria Norte 2713 S.M.P. Lima
Central Telefonica: 719-8508
Telefono: (51-1) 556-2174 / (51-1) 556-2161
Movil: 973981915 / 945077077 / 987520988
www.viralabperu.com



El uso de la enzima GDH-FAD, GluNEO Lite ha reducido las influencias de 20 diferentes sustancias de interferencias, incluyendo interferencia de la maltosa y galactosa que son perjudiciales para determinar el nivel exacto de glucosa en la sangre.

Debido a que no está siendo afectada por la saturación de oxígeno, la auto-prueba de la sangre entera capilar y sangre entera venosa está disponible.

Precisión

Medida	Muestras de sangre capilar y sangre venosa
Volumen de sangre	0.5 ul
Rango de medición	20~600 mg/dL (1.1~33.3 mmol/L)
Tiempo de medición	5 Segundos
Uso correcto de las tiras	Identificación automática de tiras
Capacidad memoria de almacenamiento	500 EA
Temperatura operativa	10~40°C (50~104°F)
Humedad operativa	10~90%
Pantalla	LCD

Especificaciones

Tamaño	81 x 52 x 16 (mm)
Peso	42,5g(Una batería incluida) ± 1g
Fuente de poder	3V Li Battery(CR2032) x1EA
Hematocrito	20~65 %
Temperatura de almacenamiento de tiras	2~30°C (35,6~86°F)
Vida útil de la batería	Más de 1.000 mediciones consecutivas
Comunicación a Computador (PC)	Comunicación disponible a través de un cable para computador


Easy to use



1. Inserte la tira y confirme el número de código que aparece en la pantalla, con el número de código que se muestra en el frasco de tiras.



2. Pinche el dedo usando el lancetero

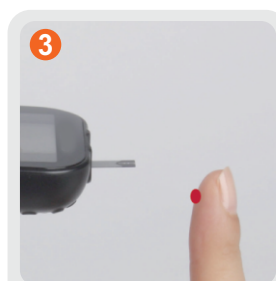

3. Aplique la muestra de sangre : 0.5ul



4. Revise sus resultados después de 5 segundos

OHC
OSANG HEALTHCARE

132, Anyangcheondong-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
www.osanghc.com

Viralab S.A.
Contribuyendo con la calidad de su Laboratorio
Av. Universitaria Norte 2713 S.M.P. Lima
Central Telefonica: 719-8508
Telefono: (51-1) 556-2174 / (51-1) 556-2161
Movil: 973981915 / 945077077 / 987520988
www.viralabperu.com